




PE9

BEIDHÄNDIG UND VIELSEITIG
EINSETZBAR

PE9: DIE WEITERENTWICKLUNG EINES FRANZÖSISCHEN MASSSTABS.

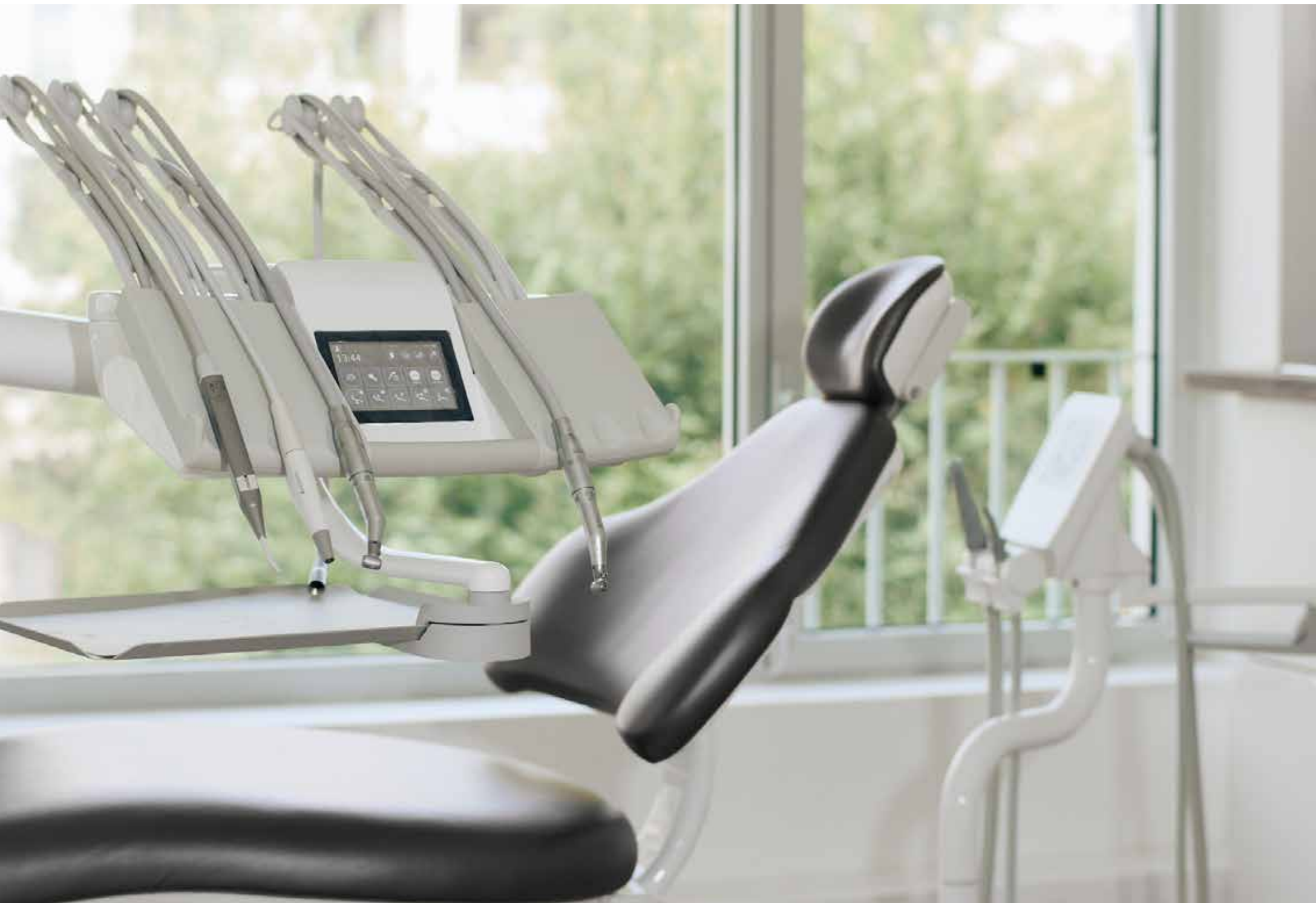

Seit über 80 Jahren entwickelt und fertigt die -AirelQuetin-Gruppe Zahnarztstühle und handelt dabei nach einer einfachen Überzeugung: Ein Zahnarztstuhl muss sich dem Zahnarzt anpassen, niemals umgekehrt.

Als Erbe eines einzigartigen französischen Know-hows entwickelt unsere Unternehmensgruppe in Champigny-sur-Marne Geräte, bei denen Ergonomie, Hygiene und Design im Dienste der medizinischen Arbeit zusammenkommen.

Im Laufe der Generationen hat sich der PE-Behandlungsstuhl vom PE7 zum PE9 weiterentwickelt, ohne dabei jemals seinen Charakter zu verlieren: den eines präzisen, zuverlässigen Instruments, das ganz auf den Komfort von Behandler und Patient ausgelegt ist.

Das PE9 gilt heute in Frankreich als Maßstab für ergonomische Leistung und bietet zugleich eine echte beidhändige Lösung, die sich an jede Arbeitsweise anpasst.

DIE SÄULEN UNSERES -KNOW-HOWS

Ihre Arbeitsweise ist einzigartig – genau wie unser Sessel

Wir sind davon überzeugt, dass es keine schlechten Behandlungstühle gibt ... nur falsche Entscheidungen. Jeder Behandler hat seine eigene Arbeitsweise, sein eigenes Umfeld und seine eigenen Gewohnheiten. Unsere Aufgabe? Wir helfen Ihnen dabei, die Ausstattung zu finden, die zu Ihnen passt.

Unsere Stühle sind so konzipiert, dass sie sich Ihrer Körperhaltung, Ihren Bewegungen und Ihrem Raum anpassen – und nicht umgekehrt. Dank unserer Fachkompetenz und unserer hauseigenen Konstruktionsabteilung unterstützen wir Sie dabei, einen Arbeitsbereich zu schaffen, der fließend, natürlich und frei von Einschränkungen ist. Bequemes Arbeiten bedeutet, besser und länger zu arbeiten – und dabei Ihren Körper zu schonen.



Die Reinheit des Wassers, die Gelassenheit der Geste

Hygiene liegt uns im Blut. Bereits 1985 entwickelte Airel mit IGN® und Calbénum® zwei Innovationen, die die Desinfektion der Wasserkreisläufe von Zahnarztstühlen revolutionierten.

Auch heute noch steht dieser Anspruch im Mittelpunkt all unserer Entwicklungen. Unsere integrierten Systeme sorgen für eine kontinuierliche Desinfektion, begrenzen Kalkablagerungen und verhindern die Bildung von Biofilmen – für gesundes Wasser, dekontaminierte Geräte und eine sichere Umgebung.

Hygiene ist keine Option. Dies ist die Garantie für ein dauerhaftes Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen, Ihrem Team und Ihren Patienten.





Design und Funktionalität vereinen

Da ein Zahnarztstuhl ebenfalls ein zentraler Bestandteil Ihrer Praxis ist, muss er so gestaltet sein, dass er sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional und vertrauenerweckend ist. Unsere Linien sind klar, unsere Formen leicht, unsere Volumen so konzipiert, dass sie Platz sparen und Bewegungsfreiheit bieten. Jedes Detail hat seine Bedeutung: eine abgerundete Abdeckung für eine einfache Reinigung, eine glatte Oberfläche für die Pflege und eine Auswahl an harmonischen Farbtönen, um einen Schrank ganz nach Ihrem Geschmack zu gestalten.

Französische Qualität – zertifiziert und nachhaltig

Ein französischer Hersteller zu sein, ist nicht nur ein Label, sondern eine Verpflichtung. 90 % der Komponenten von AirelQuetin- werden in Frankreich in unseren nach ISO 13485 zertifizierten Werkstätten gemäß den strengsten Normen für Medizinprodukte (Klasse IIa) hergestellt.

Wir legen Wert auf Qualität, Reparaturfreundlichkeit und Langlebigkeit – mit langfristig verfügbaren Ersatzteilen und einem Netzwerk regionaler Techniker, die Ihnen zur Seite stehen. Unser umweltbewusstes Handeln ist langfristig angelegt: Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten mit Ecosystem, verantwortungsbewusster Umgang mit Materialien.



PE9, DIE PERFEKTE BALANCE

KOMFORT UND LEISTUNG

Der in Frankreich entwickelte und hergestellte PE9 verkörpert das Know-how von Airel-Quetin in Sachen Komfort, Design und Leistung.

Er ist vollständig ergonomisch, beidhändig nutzbar und symmetrisch und lässt sich dank seiner Schwingarme mit großem Bewegungsradius und den verstellbaren Hängeschnüren in wenigen Sekunden von einer Rechtshänder- auf eine Linkshänder-Stellung umstellen.

Die Trendelenburg-Lage verbessert die Sicht des Behandlers und gewährleistet dem Patienten eine sichere und bequeme Körperhaltung, die sich ideal für Eingriffe eignet, die Präzision und eine sichere Handhabung erfordern.

Die breite Sitzfläche und die Polsterung mit Formgedächtnis, die aus fünf Schichten Funktionsschaum besteht, sorgen sowohl für den Behandler als auch für den Patienten für eine ausgewogene Stützung und dauerhaften Komfort.

Der PE9 vereint Eleganz, technische Raffinesse und höchste Ansprüche und zeichnet sich durch ein bis ins kleinste Detail durchdachtes Design aus.





KOPFSTÜTZE AN PNEUMATISCHE UNTERSTÜTZUNG

**Komfort durch seitliche und
rotierende Bewegungen.**

Die dreifach gelenkige Kopfstütze passt sich perfekt an alle Kopfpositionen des Patienten an und sorgt so für optimalen Komfort. Eine ergonomische Stütze im Nackenbereich gewährleistet einen natürlichen und stabilen Halt. Mit nur einem Knopf lassen sich die seitliche Bewegung, die Drehung und die vertikale Verstellung steuern, die alle pneumatisch unterstützt werden. Die Kopfstütze kann auch für Kinder eingestellt werden und eignet sich somit ideal für die Arbeit in der Kinderzahnheilkunde.



EINE KOMPLETTE AUSSTATTUNG

SCHNEEBESEN-SET

Das beidseitig nutzbare Tablett, das am Behandlungsstuhl von AirelQuetin- befestigt ist, gestaltet die Ergonomie in der Zahnarztpraxis völlig neu und bietet dem Zahnarzt ein flüssiges und intuitives Arbeitserlebnis. Jedes Detail ist darauf ausgelegt, unnötige Bewegungen zu minimieren und eine korrekte Körperhaltung zu gewährleisten. So kann sich der Zahnarzt ganz auf die Behandlung konzentrieren.

- Instrumente in „Kopfüber“-Position: lassen sich leicht greifen und neu positionieren, sowohl rechts als auch links.
- Maximale seitliche Flexibilität und Geschmeidigkeit: Der Schwenkbereich der Schwingarme und die Länge des Seils ermöglichen einen optimalen Zugang zum Mundraum.



Das handliche und flexible Schwingarm-Tablett bietet Platz für 2 bis 8 Instrumente, die „kopfüber“ angebracht werden können und sich sowohl rechts als auch links leicht greifen und neu positionieren lassen. Die Schwenkweite der Schwingarme und die Länge des Kabels ermöglichen einen optimalen Zugang zum Mundraum.



Am Sessel befestigtes, beidseitig nutzbares Tablett

Die beidseitig verwendbare, am Fuß des Stuhls befestigte Ablage mit flexiblen Halterungen lässt sich rund um den Kopf des Patienten positionieren und ermöglicht so das Arbeiten mit zwei oder vier Händen – sie passt sich an alle Behandler an.



Beidseitig nutzbares Regal, an der Decke befestigt


In transthorakaler und beidseitiger Position wird die Peitschenvorrichtung an der Decke befestigt, um den Zugang zum Patienten vollständig freizuhalten.

Diese Konfiguration ist für eine allgemeine zahnärztliche Praxis oder die Implantatchirurgie vorgesehen.



Beidseitig nutzbares Tablett, seitlich am Sessel befestigt

Das beidseitig nutzbare Tablett ist am Fuß des Sessels befestigt und bietet Platz für bis zu 6 neigbare Instrumente. Sie verbessert Ihre Arbeitsposition bei direkter oder indirekter Sicht in einem Bereich zwischen 11 und 13 Uhr.

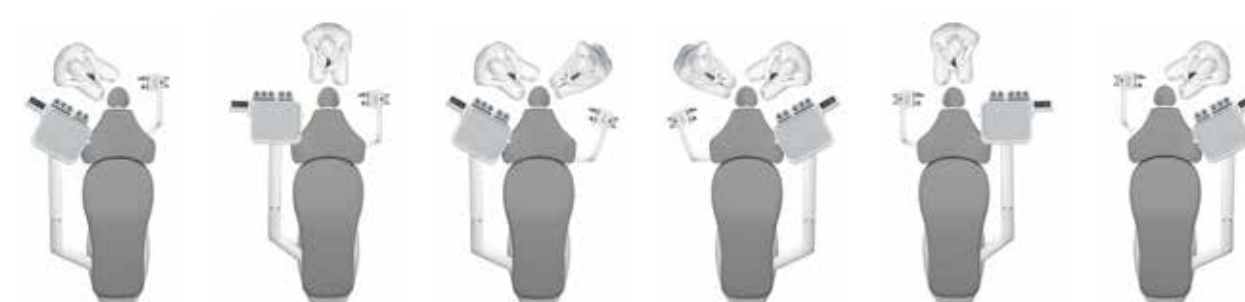

EINHEIT: HÄNGEKABEL

Die Instrumentenablage „Cordons Pendants“ von Airl-Quetin ermöglicht eine optimierte Anordnung der Instrumente. Jedes Instrument ist griffbereit und befindet sich in der Nähe des Kopfes des Patienten, was ein flüssiges und komfortables Arbeiten ermöglicht. Die breite Ausführung der Instrumentenablage. Die an einem ausgleichenden Arm befestigte Instrumentenablage bietet Platz für bis zu 6 Instrumente.



- Instrumente mit „Kopf nach oben“: Die variable Neigung erleichtert das Greifen.
- Beweglichkeit des Instruments: flexible Drehung und Positionierung für maximale Ergonomie.
- Anleitung: Für eine präzise und sichere Handhabung bei jedem Gebrauch.
- 2 herausnehmbare Einlegeböden: So wählen Sie die passende Ablage aus




Regal in Wandmontage

In einem kleinen Behandlungsraum ermöglicht die Wandhalterung mit Ausgleichsarm die Nutzung eines Geräts mit vollem Funktionsumfang und lässt sich unter einem Unterschrank verstauen, um den Empfangsbereich für die Patienten freizuhalten.


DER MOBILE EINKAUFSWAGEN

Der mobile Wagen besticht durch ein modernes und ergonomisches Design. Er ist platzsparend und kann je nach Bedarf am Rollstuhl befestigt oder eigenständig verwendet werden. Das Gerät ist beidhändig bedienbar: Bildschirm und Tastatur lassen sich je nach Bedarf links oder rechts anbringen, sodass es sich perfekt an jede Anwendungssituation anpasst.

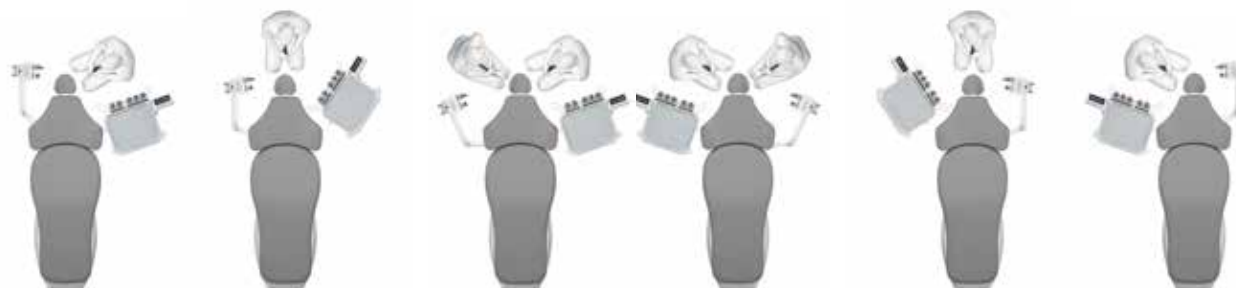

DIE UNIT LITE ORTHO

Dieses kompakte Tablett vereint eine Absaugkanüle und die für die kieferorthopädische Praxis erforderlichen dynamischen Instrumente. Die Einheit ist über einen schwenkbaren Arm mit doppelter Ablage beidseitig am Behandlungsstuhl befestigt und bietet so eine hohe Handhabungsfreundlichkeit sowie optimalen Zugang.

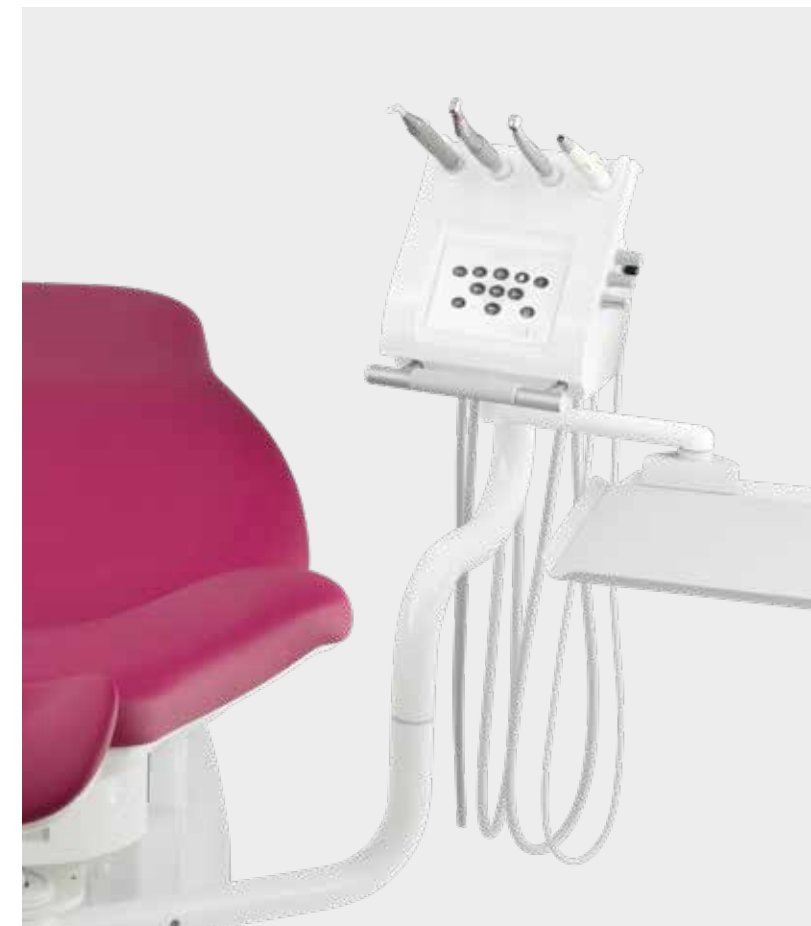

DIE KONTROLLBILDSCHIRME

Die Arel-Quetin-Bedienfelder wurden entwickelt, um Sie in jeder Phase der Behandlung zu unterstützen, und vereinen Ergonomie, Präzision und Hygiene. Sie haben sofortigen Zugriff auf alle Funktionen des Geräts und können die Einstellungen entsprechend Ihren Behandlungsprotokollen individuell anpassen.




EVO.2

Der hochauflösende Farb-Touchscreen.

Mit seinem 7-Zoll-HD-Farbdisplay ermöglicht das EVO.2 eine umfassende und intuitive Steuerung des Geräts.

Jedes Gerät lässt sich präzise einstellen und so programmieren, dass die Behandlungsprotokolle festgelegt werden können.

EVO.2 ist vollständig abgedichtet und gewährleistet somit einwandfreie Hygiene. Das Gerät verfügt über die neuesten technologischen Entwicklungen (Wave One, Videoüberwachungskamera usw.) und sorgt so für ein reibungsloses, individuelles und skalierbares Arbeitserlebnis.

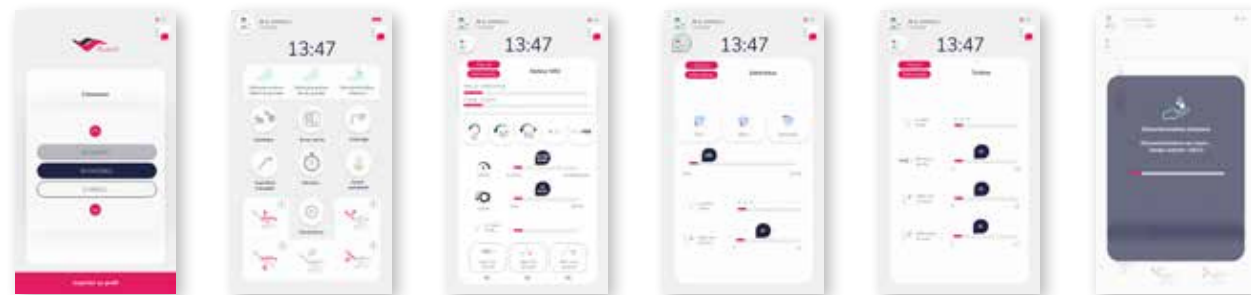

Zugriff auf die verschiedenen Benutzerprofile mit Zugriffskontrolle.

Hauptmenü: Zugriff auf die Sesselpositionen, die Stoppuhr, die Kamera ... sowie auf die Einstellungen und Konfigurationen der Benutzeroberfläche

Vorauswahl der Drehzahl der Mikromotoren, Drehmoment-Einstellung, Auto-Reverse, Wave-One, Auto-Forward.

Einstellung der Leistung des piezoelektrischen Zahnsteinentferners Auswahl der Paro-/Endo-Modi /Zahnsteinentferner.

Einstellung der Lichtintensität sowie der Luft- und Wasserdurchfluss-Mengen der Sprühdüsen.

Desinfektion der Zahnarztstation und Reinigung der Instrumente (tägliches, wöchentliches und intensives Protokoll)

NEO.2

Der monochrome Touchscreen.

Der kompakte und ergonomische Bildschirm NEO.2 zeigt alle Funktionen des Geräts auf einem hintergrundbeleuchteten Monochrom-Touchscreen an.

Seine vollständige Dichtheit gewährleistet perfekte Hygiene und eine außergewöhnliche Langlebigkeit.

Genau wie beim EVO.2 lassen sich die persönlichen Einstellungen dank der Speicherung auf einem USB-Stick ganz einfach auf jeden anderen Sessel übertragen.

Ein zuverlässiges und praktisches Werkzeug, ideal für einen entspannten Arbeitsalltag.



Hauptmenü: Zugriff auf die Sesselpositionen, die Stoppuhr sowie die Einstellungen für die Benutzeroberfläche und die Instrumente.

Anzeige und Vorwahl der Drehzahl der Mikromotoren-, Drehmoment-Einstellung sowie die Funktionen „Auto-Reverse“ und „Auto-Forward“.

Einstellung der Leistung des piezoelektrischen Zahnsteinentferners Auswahl der Paro-/Endo-Modi /Zahnsteinentferner.

Einstellung der Lichtintensität sowie der Luft- und Wasserdurchfluss-Mengen der Sprühdüsen.

Zugriff auf die Einstellungen für die Speicherung der Sesselpositionen, Uhrzeit, Datum, Sprachen usw.



DAS KABELLOSE PEDAL

Das kabellose Fußpedal ermöglicht eine uneingeschränkte und völlig freie Steuerung des Geräts und vereint Ergonomie, Präzision und Hygiene. Dank seiner einzigartigen stufenlosen Steuerung lassen sich alle wesentlichen Funktionen des Behandlungstuhls und der Instrumente kabellos per Fußsteuerung bedienen, was für einen unvergleichlich reibungslosen Arbeitsablauf sorgt. Dank der stufenlosen Steuerung lassen sich die Drehzahl der Instrumente, die Leistung des Zahnsteinentferners oder die Intensität des Sprühstrahls präzise einstellen. Die Funktionen „Chip Air“ und „Chip Eau“ können ebenso wie die Bewegungen des Behandlungstuhls oder der Zugriff auf gespeicherte Positionsprogramme mit einem einfachen Tastendruck sofort aktiviert werden.

Optimale Ergonomie und Hygiene

Das Pedal ist als „Druck“- oder „Seitenschalter“-Version erhältlich und passt sich ganz natürlich der Körperhaltung und den Arbeitsgewohnheiten an. Der kabellose Betrieb bietet große Bewegungsfreiheit und vermeidet jeglichen unnötigen Kontakt, was für einwandfreie Hygiene am Boden sorgt. Der Akku mit langer Laufzeit, der mehrere Monate hält, gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb über den ganzen Tag hinweg.

Erweiterte Funktionen für mehr Effizienz

- Manuelle oder automatische Absaugung
- Steuerung des Stuhls und der Spuckschale, programmierte oder manuelle Bewegungen
- Sicherheitsstopp durch einfaches Drücken auf den Bügel
- Einfachere Reinigung: Vorübergehende Sperrung des Bildschirms, um eine versehentliche Aktivierung während der Reinigung zu verhindern.

ZUSATZMODULE

SAUGHALTERUNG MIT TASTATUR

Die Absaugvorrichtung PE9 mit Tastatur ist ein echter Arbeitsplatz für die Arzthelferin bzw. den Arzthelfer und auch für einen allein arbeitenden Arzt perfekt zugänglich.

Er wird an der Rückseite des Behandlungsstuhls in beidhändiger Position befestigt und bietet die bestmögliche Positionierung, während er gleichzeitig kompakt und unauffällig bleibt. Ausgestattet mit Behandlungsstuhl-Bedienelementen, zwei selektiven Kanülen, zwei Filtern und dem Aspisept®-System verfügt er über ein Bedienfeld, das die Hauptfunktionen der Einheit dupliziert.

Im Sinne einer vorbildlichen Hygiene ist jeder Absaugschlauch zerlegbar und autoklavierbar, und jede Leitung ist mit einem Rückhaltefilter ausgestattet, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.



UNTERSTÜTZUNG FLEX-ABSAUGUNG

Dieses Modul ist mit einem flexiblen oder einem Gelenkarm erhältlich und vereint Komfort und Handlichkeit.

Eine einfache und effektive Lösung, um Ihren Arbeitsbereich an Ihre Arbeitsgewohnheiten anzupassen.



DER SPUCKNAPF

Der Spucknapf PE9 wurde als echte, natürliche Erweiterung des Sessels konzipiert.

Er ist unabhängig vom Gerät, schwenkbar und wird direkt am Sessel in beidseitig nutzbarer Position befestigt, um dem Patienten den Zugang zu erleichtern – unabhängig von der Art der Behandlung oder der Arbeitsposition.

Es ist mit der Cuspiclean®-Technologie ausgestattet, die dank einer integrierten, sich auflösenden Kartusche eine kontinuierliche Desinfektion des Wassers im Becken gewährleistet.

Jede Spülung wird zu einer sicheren und kontrollierten Handlung, die zu einer optimalen Hygiene am Behandlungsplatz beiträgt. Die abnehmbare Glaswanne, die in verschiedenen Farben erhältlich ist, lässt sich zur Reinigung leicht abnehmen und fügt sich harmonisch in das Design des Behandlungsstuhls ein.



HYGIENE IM MITTELPUNKT IHRER ZAHNARZTPRAXIS

Zahnarztpraxen sind Orte, die besonders anfällig für mikrobiologische Kontaminationen sind. Aufgrund der Art der Behandlungen befinden sie sich an der Schnittstelle zweier Körperwege (Verdauungs- und Atemtrakt), wobei eine mögliche Exposition gegenüber Blut, Aerosolen und komplexen Geräten besteht. Das in einer Zahnarztpraxis verwendete Wasser kann eine Kontaminationsquelle darstellen, sei es bei Sprühgeräten, Instrumenten oder Absaugsystemen.

Diese Faktoren begünstigen die Ausbreitung von Infektionserregern (für den Arzt, das

Pflegepersonal und den Patienten), wenn keine strengen Maßnahmen ergriffen werden.

Seit mehr als 35 Jahren steht bei Arel-Quetin die Hygiene im Mittelpunkt der Entwicklung seiner Zahnarztstühle. Als Vorreiter im Bereich der integrierten Dekontamination hat die Unternehmensgruppe exklusive Lösungen entwickelt, um die Sicherheit von Behandler und Patient zu jeder Zeit zu gewährleisten. Wir haben zwei sich ergänzende Technologien entwickelt, die in den Behandlungsstuhl integriert sind und eine kontrollierte Hygiene über die gesamte Behandlungskette hinweg gewährleisten.

DAS WASSER AUS DEN SPRÜHFLASCHEN



IGN Evo®

Vollautomatisches System zur Reinigung des Sprühwassers, angeschlossen an die städtische Wasserversorgung. IGN Evo® ist als externes Gerät oder in den Behandlungsstuhl integriert erhältlich und gewährleistet eine kontinuierliche und zuverlässige Wasseraufbereitung für jeden Patienten.



Calbenium®

Desinfektions- und Entkalkungsmittel für alle Kreisläufe von zahnärztlichen Behandlungseinheiten, einschließlich Aerosole. Calbenium® kann zusammen mit IGN Evo® oder allein verwendet werden und sorgt stets für sauberes, sicheres Wasser, das den strengsten Hygienestandards entspricht.



IGN Cartridge®

Diese Zusatzfilterpatrone reinigt das Wasser der Sprühgeräte kontinuierlich, wenn sie zusammen mit IGN Evo® und Calbenium® eingesetzt wird. Sie gewährleistet ein optimales Sicherheitsniveau und schützt Ihre Patienten bei jeder Behandlung.

DIE INSTRUMENTE UND SAITEN



Aspisept®

Internes System zur Dekontamination der Absaugschläuche mit Calbenium®. Jede Leitung wird automatisch gereinigt und desinfiziert – ganz ohne aufwendige Handgriffe –, um eine konstante und kontrollierte Hygiene zu gewährleisten.



Calbepuls®

Verfahren zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Instrumentenköpfen mittels eines mit Calbenium® angereicherten Druckluftstrahls und Wasserstrahls. Es beseitigt nach jeder Behandlung jegliches Risiko einer Restkontamination und gewährleistet so die Sicherheit sowohl des Behandlers als auch des Patienten.




Calbenium® Spray

Gebrauchsfertige, alkoholfreie und nicht ätzende Lösung zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen.



DIE SITZE

Wir wissen, dass jede Bewegung zählt und dass die Körperhaltung direkten Einfluss auf den Komfort und die Präzision der täglichen Arbeit hat. Aus diesem Grund bieten wir ergonomische, anpassbare und leistungsstarke Behandlungsstühle an, die den spezifischen Anforderungen jedes einzelnen Gesundheitsfachmanns gerecht werden und dabei Ästhetik und Funktionalität vereinen.

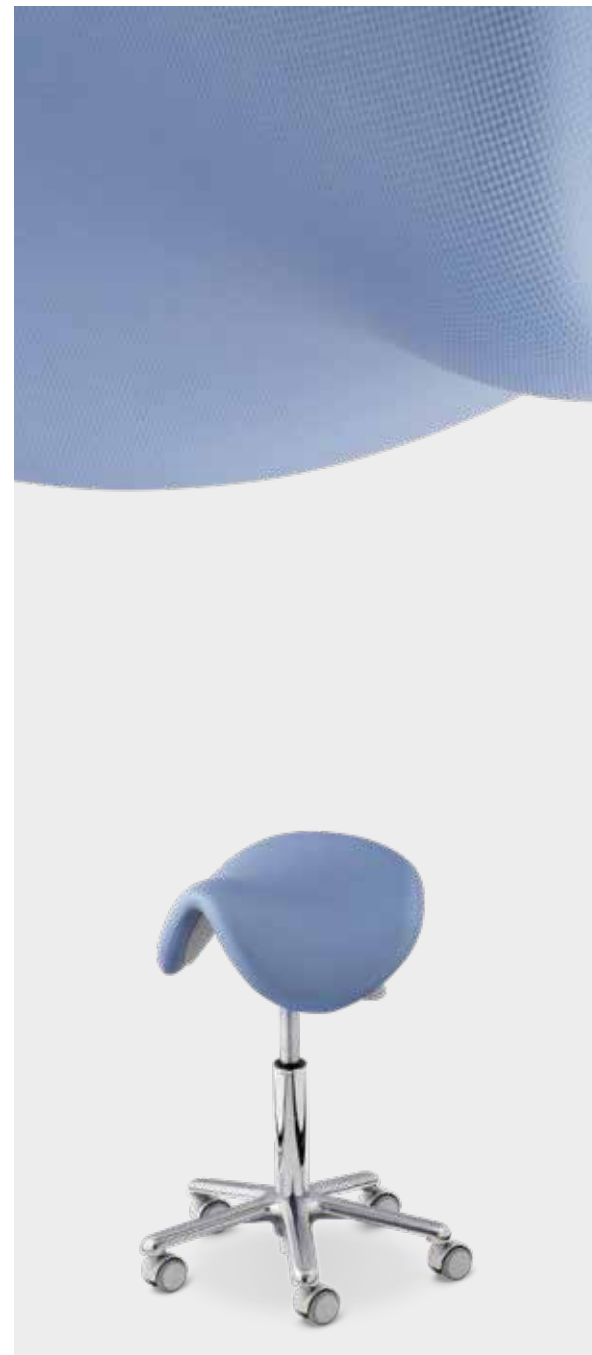

HARLEY

Der Harley-Sitz sorgt für optimalen Komfort und eine optimale Körperhaltung bei langen Einsätzen:


- Individuell gestaltbare Beschichtung
- Die Rückenstütze und die Neigung der Beine sind so konzipiert, dass Ermüdungserscheinungen minimiert werden.
- Die Auflagefläche wurde durch die Ausweitung der Stütze bis zu den Oberschenkeln um 20 % vergrößert – für dauerhaften und überragenden Komfort.



SYNCHRO

Der Synchro-Bedinersessel vereint Ergonomie und praktische Unterstützung, um jede Bewegung geschmeidig zu begleiten:

- Individuell gestaltbare Beschichtung.
- Optimale Rückenstützung, die den ganzen Tag über gleichbleibenden Komfort gewährleistet.
- Integrierte Fußstütze für eine natürlich ausgeglichene Sitzhaltung.

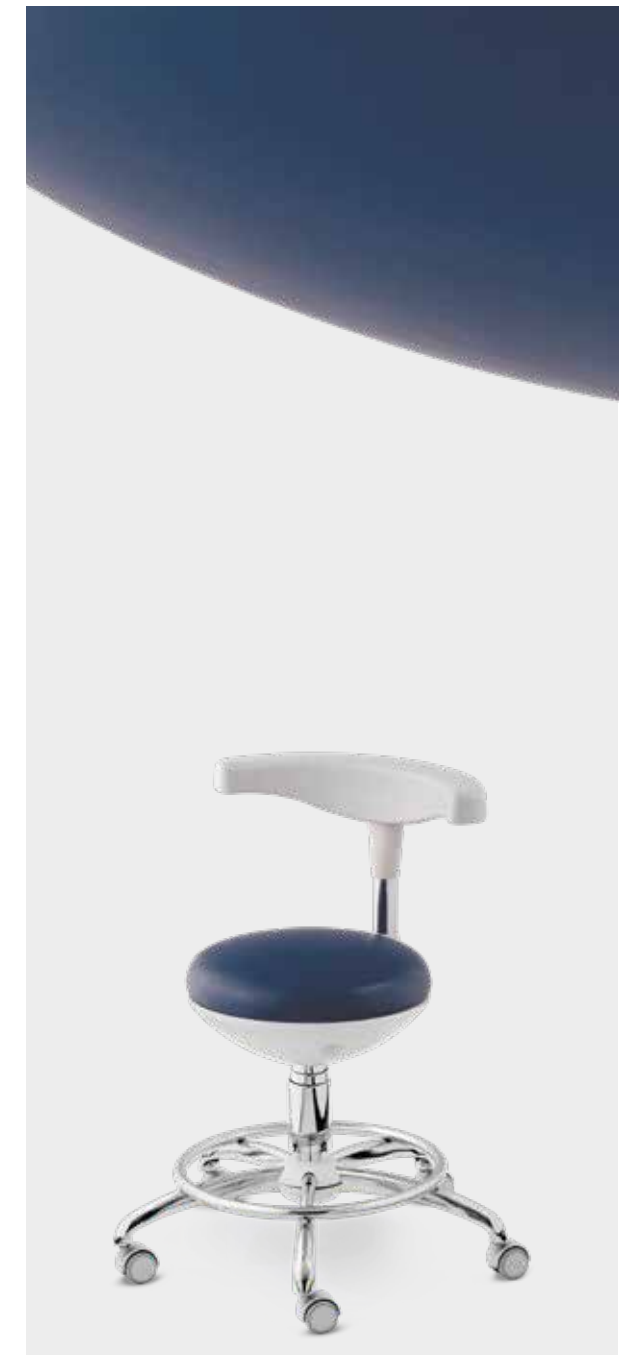

ASSISTIEREN

Der Sitz des Assistenten vereint Funktionalität und maßgeschneiderten Komfort:

- Individuell gestaltbare Beschichtung
- Multifunktionale Rückenlehne, die je nach Bewegung als Stütze oder Armlehne dient.
- Integrierte Fußstütze für eine stabile und entspannte Haltung während der Eingriffe.

Sitzfläche mit -Doppelschaum-
Polsterung, in vielen
verschiedenen Farben
erhältlich.



Rechtes Seitenpedal:
Steuerung der
Sprühdosen, des
Spuckbechers oder
der Bewegung des
Stuhls.

Linkes Pedal: Steuert die
Instrumente und arretiert die
Drehung des Sitzes.

NIRVA 13

Ergonomie und Komfort in einem.

Die „Knie-Sitz-Haltung“ entstand aus der Suche nach einer bequemerer und weniger gesundheitsschädlichen Arbeitshaltung. Diese Haltung zeichnet sich durch eine ergonomische Besonderheit aus, nämlich die Dreiecksformation aus Auge, Becken und Knien.

Wenn sich der Behandler künftig nach vorne beugt, beugt er seine Wirbelsäule nicht, sondern stützt sich auf die natürliche Drehung seines Körpers im Hüftbereich **(1)**.


Der erste Vorteil besteht darin, dass dadurch keine Erkrankungen der Wirbelsäule, des Kreislaufs oder der Atemwege verursacht werden: Der Brustkorb wird nicht mehr zusammengedrückt, da der Rücken gerade bleibt. Somit arbeitet der Behandler nicht unter Atemstillstand und ist nicht mehr den Problemen im Zusammenhang mit dem CO₂-Gehalt im Blut ausgesetzt.

Die zweite Verbesserung gegenüber anderen Positionen ist die doppelte Stütze „Gesäß-Knie“-**(2)**. Diese doppelte Stütze sorgt für eine bessere Durchblutung. Die Venen in den Hüften werden nicht zusammengedrückt, was den Blutfluss fördert. Die „Kniestellung“ verhindert das Sitzen in Kyphose und beansprucht eher die seitlichen Rücken- und Bauchmuskeln als die Knochenstrukturen.

Zu beachten ist außerdem, dass sich der Behandler aufgrund der Neigung der Beine neben den Patienten stellen kann, ohne durch den Behandlungsstuhl behindert zu werden, unabhängig vom Stuhltyp. So befindet er sich so nah wie möglich am Patienten und hat einen besseren direkten Blick auf das Operationsfeld.

Die Trilogie „Behandler hoch – Stuhl tief – Ablage tief“ ermöglicht dem Behandler eine gute direkte Sicht auf das Operationsfeld in der Höhe **(3)**, ohne dass er sich verrenken muss, um an seine auf der Ablage befindlichen Instrumente (transthorakaler Peitschengriff, unabhängiger Kart) zu gelangen. So kann er seine Arbeit unter guten Bedingungen ausführen und zahlreiche Probleme vermeiden, die durch schlechte Ergonomie verursacht werden.

Ref.:

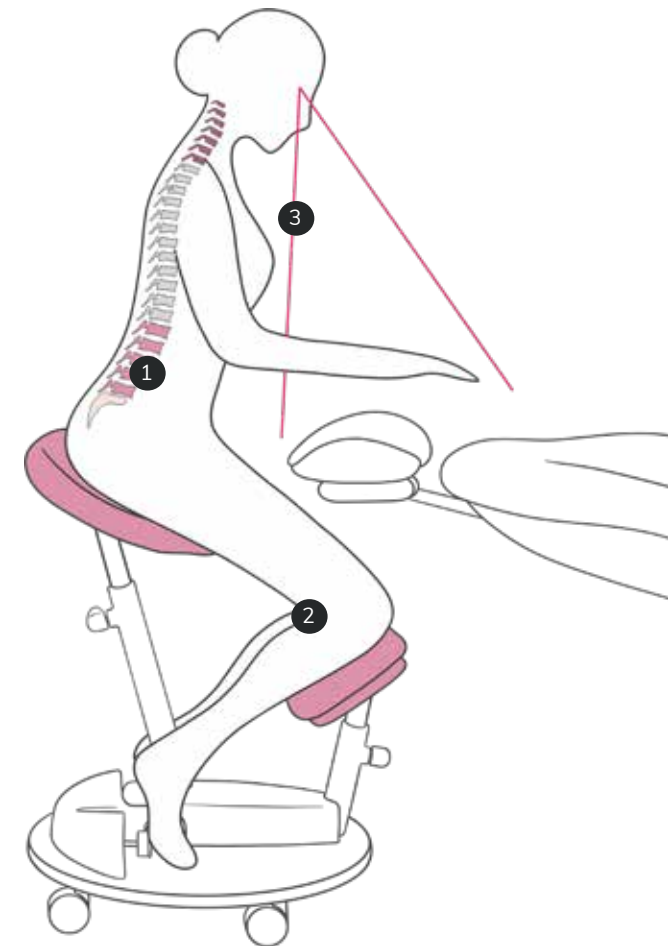

FARBKARTE

Airel-Quetin bietet eine vielfältige Auswahl an Farbkarten für seine Polsterungen, die sowohl Strapazierfähigkeit als auch Originalität vereinen.

Jede Farbe und jede Struktur wurde sorgfältig ausgewählt, um eine perfekte Harmonie mit dem Ambiente und den Farbtönen der Praxen zu gewährleisten und gleichzeitig optimale Langlebigkeit zu bieten.

Die ausgewählten Materialien verschönern nicht nur den Raum, sondern gewährleisten auch eine dauerhafte Leistungsfähigkeit und sind widerstandsfähig im täglichen Gebrauch. Diese ästhetische und praktische Wahl verleiht dem Raum somit eine individuelle und elegante Note und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen von Fachleuten, die auf Qualität und Langlebigkeit Wert legen.



DIE GRUPPE -„AIRELQUETIN“



PE3, Quetin® 2001

Seit über einem Jahrhundert gilt -AirelQuetin als führender französischer Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Zahnarztstühlen und zahnmedizinischer Ausrüstung.

Die Geschichte begann 1921 mit dem Unternehmen Mangin, setzte sich 1982 mit Airel fort und führte im Jahr 2000 zur Fusion mit Quetin, einem traditionsreichen Hersteller, der 1935 gegründet wurde. Diese sich ergänzenden Fachkompetenzen verbinden Innovation und Tradition, um ganzheitliche Lösungen anzubieten, die auf alle zahnmedizinischen Fachgebiete zugeschnitten sind.



PE9, Airel-Quetin® 2025

Auf der Grundlage von Erfahrung und Forschung entwickeln wir ergonomische, modulare und designorientierte Lösungen, die mit unseren exklusiven Systemen zur integrierten Dekontamination (IGN®/Calbenium®) kombiniert werden.

Unser Ziel: Zahnärzten ein leistungsstarkes, hygienisches und auf jedes zahnmedizinische Fachgebiet zugeschnittenes Arbeitsumfeld zu bieten.

Als unabhängiges Familienunternehmen stellt -AirelQuetin den Menschen, die Qualität und die Innovation in den Mittelpunkt jedes Projekts. Unsere Behandlungsstühle und -einheiten werden vollständig in unserem Werk in --Champigny-sur-Marne entwickelt und montiert, das nach ISO 13485 zertifiziert ist – ein Garant für Konformität und Sicherheit. Jedes Gerät, ein Medizinprodukt der Klasse IIa (CE-Kennzeichnung), verfügt über eine Garantie von 2 Jahren, die auf bis zu 5 Jahre verlängert werden kann, um den Praxisbetrieb langfristig zu unterstützen.



Bei Airel-Quetin stehen die zwischenmenschlichen Beziehungen im Mittelpunkt. Zuhören, Reaktionsfähigkeit und Kundennähe prägen unsere tägliche Betreuung. Unser landesweit vertretenes Vertriebs- und Technikteam gewährleistet eine individuelle Betreuung vor, während und nach der Installation.

Von den Hochschulen bis zu den Privatpraxen, von den Krankenhäusern bis zum Militär – wir alle teilen dieselbe Überzeugung: den Fachkräften im Dentalbereich zu dienen, sie zu begleiten und zu schützen.





SEIT 1982 DER EXPERTE FÜR
ZAHNARZTPRAXEN.



www.airel-quetin.com
01 48 82 22 22
choisirfrancais@airel.com

Die Airel-Quetin-Geräte sind Medizinprodukte der
Klasse IIa. Benannte Stelle: SZUTEST CE 2195.